


● 独创接驳程序——PVC对PVC对称接驳原理

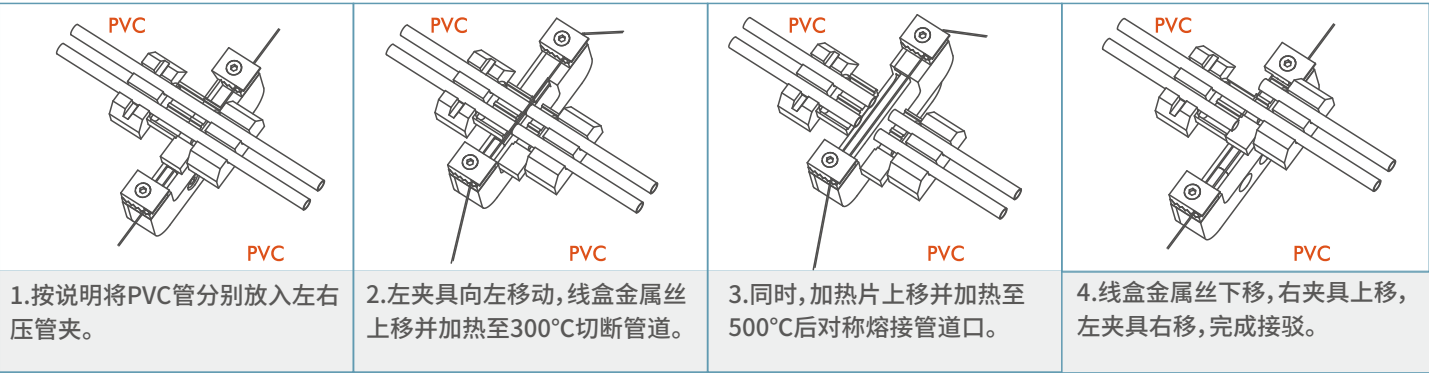

● 证书和专利

中国医疗器械注册证	中国医疗器械产品出口销售证	ISO13485	ISO9001	CE 证书	创新专利

● 产品销往23个国家和地区



● 无菌接驳设备STW6810技术参数

产品名称	产品描述
血液无菌接驳设备 STW6810	<ol style="list-style-type: none">可在普通环境(即非无菌环境)实现 PVC-PVC管道或血袋管道的无菌接驳可完成PVC管道的接管模式:干-湿/干-干/湿-湿接管强度:≥50N,符合GB14232.1-2004 /ISO3826-1:2003 的标准接驳时间:≤18秒管子规格:管道外径≤5.0mm, 内径≥2.7mm,壁厚≥0.5mm接驳管道长度:≥45mm★单盒金属丝线盒接驳次数:250次操作:7英寸彩色液晶触摸屏外形尺寸:L370 * W405 * H290mm (不带血袋托盘) / L690 * W405 * H290mm (带血袋托盘)重量:13.8±0.5KG工作额定功率:300VA电气安全:GB4793.1-2007、EN 60601-1:2006+A1 2013/ EN 60601-1-2:2007分类:CFDA 有源二类或CE/Class I



佰美斯独创专利86项
发明专利64项
实用新型18项
外观专利4项

武汉佰美斯医疗科技有限公司(专注创新血液医疗科技产业)
武汉东湖新技术开发区高新大道818号光谷生物城医疗器
械园B9-5F-CD
邮编:430206
邮箱:info@bms-bloodcare.com

佰美斯
血液无菌接驳设备 STW6810

医疗设备注册号: 20172452336

独创



应用优势

- 独创发明专利线盒接驳技术
- 稳定可靠的接驳力和接驳质量，完全满足国际标准 DIN EN ISO3826-1要求
- 可实现数据信息化、数字化可追溯的管理

因创新而领先 因质量而卓越

专注力 · 创新力 · 持续力

接驳
管道

捏通
管道

接通
管道

STW6810只为保证管道安全、稳定、无菌接驳

- 7寸彩色触屏使用舒适, 接驳过程实时显示

- 上盖单手操作

- 血袋放置翼板

- 压管夹用于对齐放置

- 血袋放置方式指示

- 用于各种管道接驳, 湿管对湿管、湿管对干管、干管对干管
- 接驳管道内径 $\geq 2.7\text{mm}$, 外径 $\leq 5.5\text{mm}$, 壁厚 $\geq 0.5\text{mm}$

佰美斯血液无菌接驳与数据管理中心




无菌接驳设备STW6810已销往世界23个国家和地区



佰美斯血液无菌接驳设备STW6810目前已出口23个国家和地区, 市场覆盖亚洲、欧洲、美洲, 受到国际客户的高度认可一致好评。

每次接驳18秒

- 信息化软件显示:

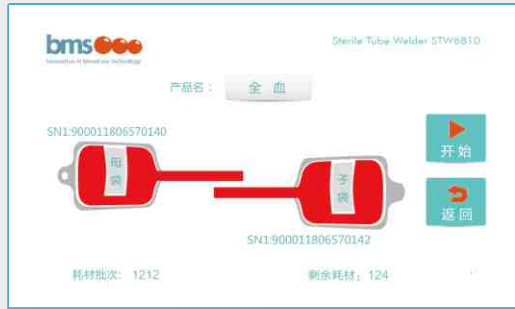

- 金属丝线盒



血液无菌接驳设备STW6810与数据机D-Solution最优组合



实现接驳数据可追溯性管理

高级新产品: 血液无菌接驳数字化工作站STW6810VIP



血浆病毒灭活专用
STW6810VIP-I



红细胞洗涤专用
STW6810VIP-II



血小板汇集专用
STW6810VIP-III